


**BioTec**

コンパクト・ワークステーション

# EDR-24LX

- 自動分注、自動希釈、サンプリングなど多用途での使用が可能
- マルチディッシュを用いた様々な細胞培養工程を支援
- 軽量コンパクトでクリーンベンチ、キャビネット内にも楽々設置

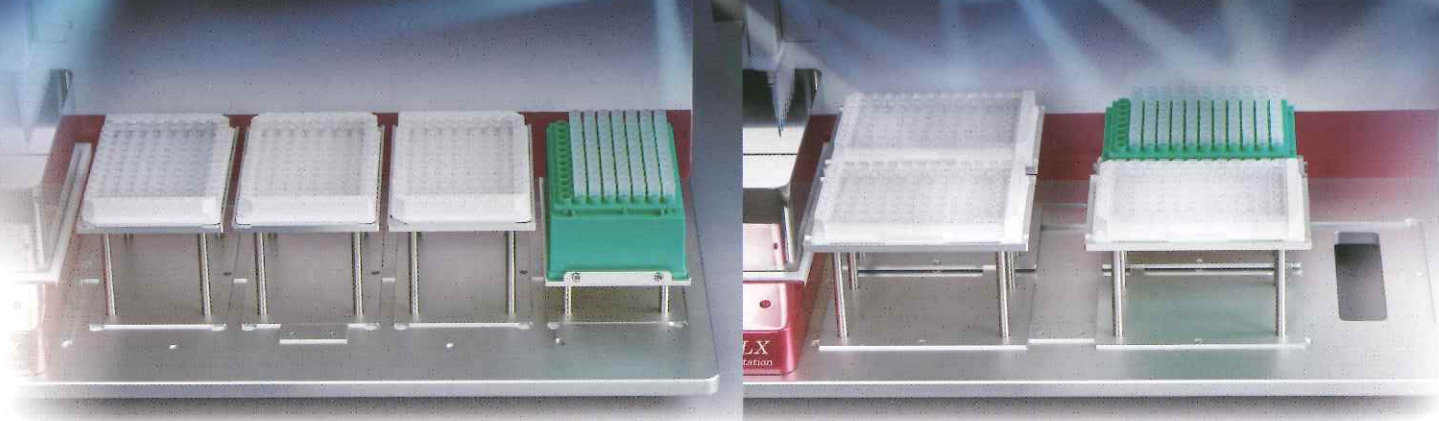

**バイオテック株式会社®**



# コンパクト・ワークステーション EDR-24LX


BioTec®



1chヘッド使用例

## 特長

- クリーンベンチ、安全キャビネットへ楽々設置でき  
不要なときには取り出せるコンパクトなサイズ
- ヘッドはワンタッチで交換可能
- チャンネル数は1ch、6ch、12ch、24chの全7種類
- ヘッド交換することで0.5 $\mu$ Lから1000 $\mu$ Lまでの  
広範囲な分注レンジに対応
- 96、384プレートに加え、各種マルチディッシュ、  
マイクロチューブ等に対応
- オプションのスタッカーを接続することで連続処理が可能
- すべてのヘッドに圧力センサーを搭載、  
液面検知によるマニュアル作業での微妙な吸引操作性の実現や  
チップ内の詰まりを検知し分注時の不具合を警告

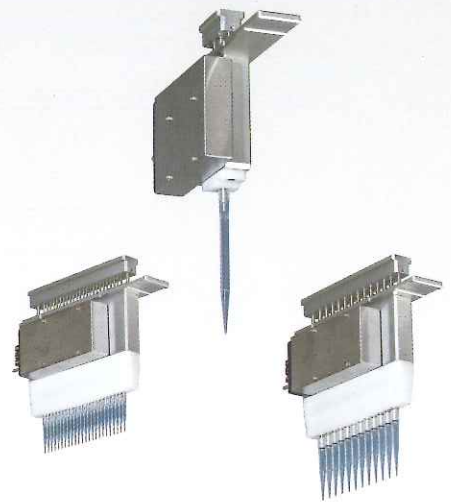

バリエーションに富んだ分注ヘッド

## 仕様と価格

分注方式	各チャンネルごとの独立シリンジ方式
分注ヘッド構成	1ch (0.5-40 $\mu$ L、1-50 $\mu$ L、10-300 $\mu$ L、10-1000 $\mu$ L) 6ch (10-1000 $\mu$ L) 12ch (1-50 $\mu$ L、10-300 $\mu$ L) 24ch (0.5-40 $\mu$ L)
分注精度	0.5 $\mu$ L~40 $\mu$ L CV3%以内 1 $\mu$ L~50 $\mu$ L CV3%以内 10 $\mu$ L~300 $\mu$ L CV3%以内 10 $\mu$ L~1000 $\mu$ L CV3%以内
ステージ数	プレート横置き時 4ステージ プレート縦置き時 4ステージ
対応プレート	各種マイクロウェルプレート、PCRプレート マイクロチューブ、採血管 など
制御	専用制御ソフト
本体寸法	(W)約570mm×(D)約430mm×(H)約450mm
本体重量	約23kg

## EDR-24LXスターターセット

1chスターターセット	¥2,850,000-
12chスターターセット	¥2,900,000-
24chスターターセット	¥3,100,000-

## 分注ヘッド

1ch 0.5-40 $\mu$ L	¥300,000-
1ch 1-50 $\mu$ L	¥300,000-
1ch 10-300 $\mu$ L	¥300,000-
1ch 10-1000 $\mu$ L	¥300,000-
6ch 10-1000 $\mu$ L	¥600,000-
12ch (8ch対応) 1-50 $\mu$ L	¥350,000-
12ch (8ch対応) 10-300 $\mu$ L	¥350,000-
24ch (16ch対応) 0.5-40 $\mu$ L	¥550,000-

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

**BioTec バイオテック株式会社**®

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル  
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554  
大阪営業所/〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-6-14  
第2日大ビル907号  
TEL.(06)6379-1555 FAX.(06)6379-1565

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail: [info@biotec.co.jp](mailto:info@biotec.co.jp)