


新製品のお知らせ

スタッカー一体型 96ウェル
マイクロプレートウォッシャー

AMW-96SY

2026年 NEW MODEL

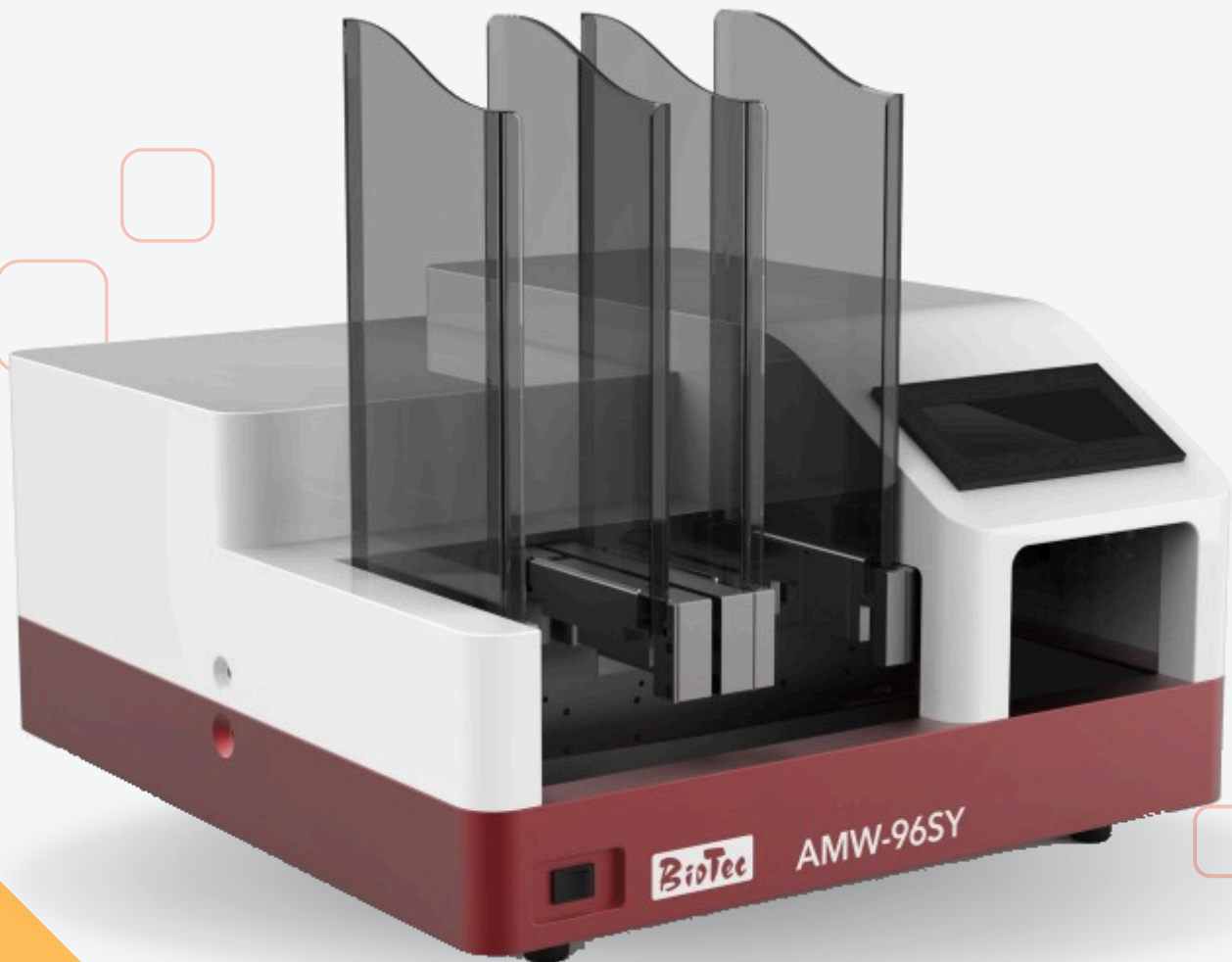



プレート供給機構

多彩な洗浄モード

BioTec

分注装置・ライフサイエンス機器のトータルプランナー

バイオテック株式会社®

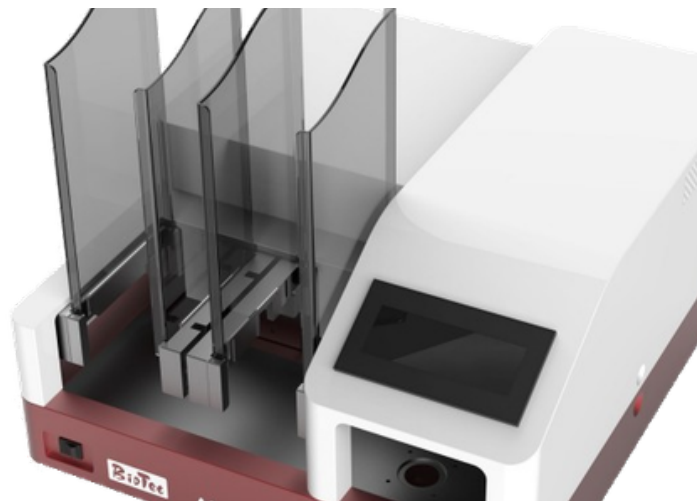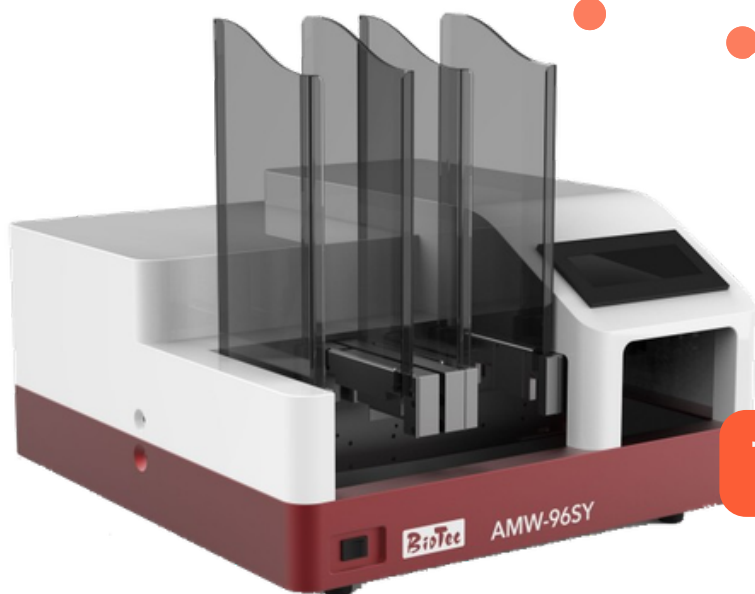

プレート供給機構

多彩な洗浄モード

AMW-96SYの特長

- ✓ 一度にマイクロプレート20枚の大量処理が可能
- ✓ 通常の洗浄モードに加え、ディスペンスエンド（最終回分注有り）、分注（のみ）モード、吸引（のみ）モードを標準搭載しているため、作業環境に応じた処理が可能
- ✓ ウェルの上端で常に吸引しながら洗浄を行う、オーバーフロー洗浄が可能
- ✓ リンスキーによりワンタッチで、ヘッド及びセンサーブロックの洗浄が行えます
- ✓ 洗浄プログラムは30種類までメモリーでき、様々な洗浄条件に細かく対応可能

製品仕様

洗浄方法	96ウェル同時洗浄、連続処理
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	250W
寸法	440(W)×490(D)×260(H)
重量	約27kg (本体のみ)
適応プレート	各種96ウェルマイクロプレート
洗浄量	0~950uL
洗浄サイクル	1~9回
洗浄時間	約30秒/枚 (350μL : 3回洗浄)

価格

AMW-96SY スターターセット (本体+廃液ボトルセット+ポンプ込)	¥3,650,000
---	-------------------

