

その作業、
もっと楽にしてみませんか？

細胞培養分野 ユーザー様向け

シーエスクリエ製フィルトレーションプレートを使用した 細胞フィルトレーション作業自動化

フィルトレーション



面倒な細胞のフィルトレーションが一括処理可能

自動分注





自動分注装置を用いることで
より一層の作業効率化

フローサイトメーター
イメージングサイトメーター



データ解析により、細胞の
特性や成分の量を定量化

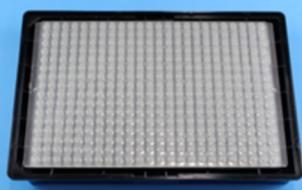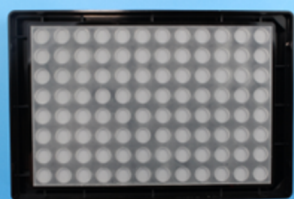

対象製品


自動分注機用
フィルトレーションプレート

規格：96well、384wellプレート対応
メッシュサイズ：30μm、70μm、100μm
材質：プレート部：ポリスチレン
メッシュ部：ポリエステル繊維
接着部：シリコン
※ガンマ線滅菌済（個包装）

対象製品

EDR-384SE

- ✓ 新開発『384ch 1-100μLシリンダーヘッド』搭載で
より一層の作業効率化を実現
- ✓ 安全キャビネット内にも設置可能なコンパクトサイズ
- ✓ 多種多様なアプリケーション・自動化システムにも対応
- ✓ オペレーターの声を反映し、更に使い易くなった日本語
制御ソフト

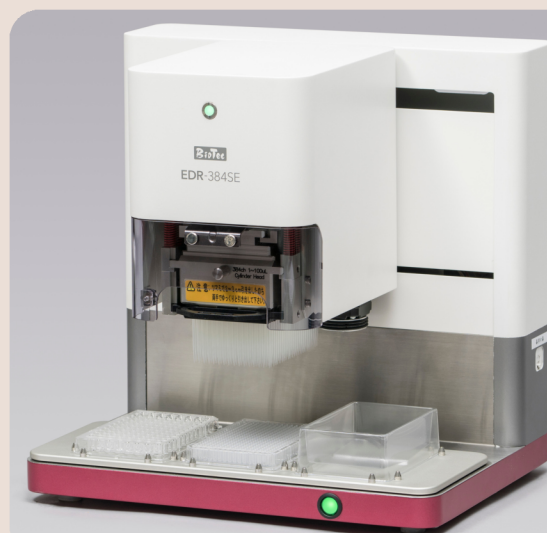

シーエスクリエ製フィルトレーションプレートを使用した 細胞フィルトレーション作業自動化



こんな **お悩み** ありませんか？



フローサイトメーターでの分析を行う際、細胞培養液の
フィルトレーションを全て手作業で行っています。
サンプル処理数も多く、時間・労力がかかるため、作業
が終わる頃には疲れてしまいます。



このお悩み、**CS CRIE** と **BioTec** が解決します！


ポイント①

クリーンベンチに設置可能な
コンパクトサイズの為、
無菌操作に最適！！





ポイント②

分注速度の設定やTipタッチ等
精密な分注テクニックも
ソフト上から簡単に設定可能

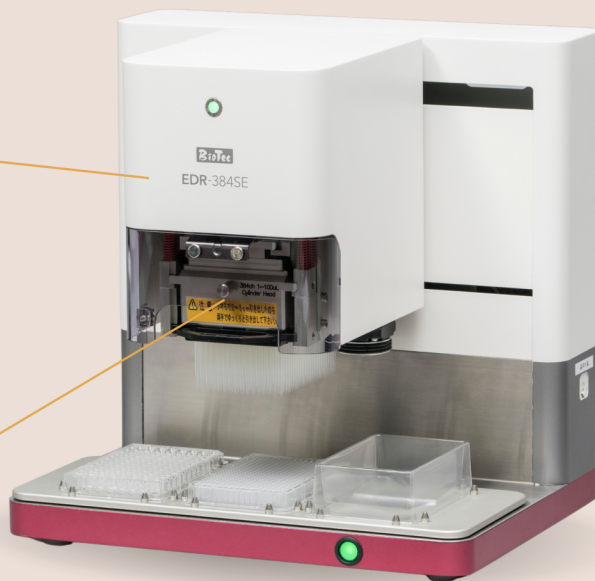

ポイント③

シーエスクリエ オリジナル特許技術
プレート間にシリコンシートを装着

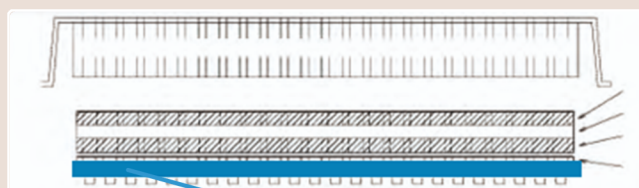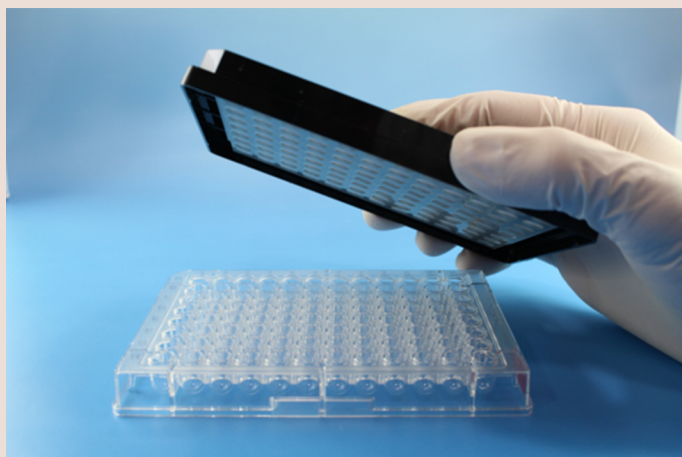

シリコンシート

