




オートメーション対応！

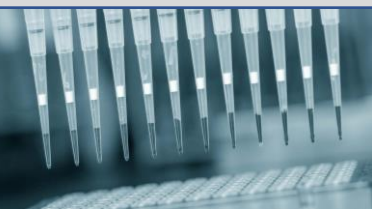

シーエスクリエ

CS CRIE

自動分注機用フィルトレーションプレート

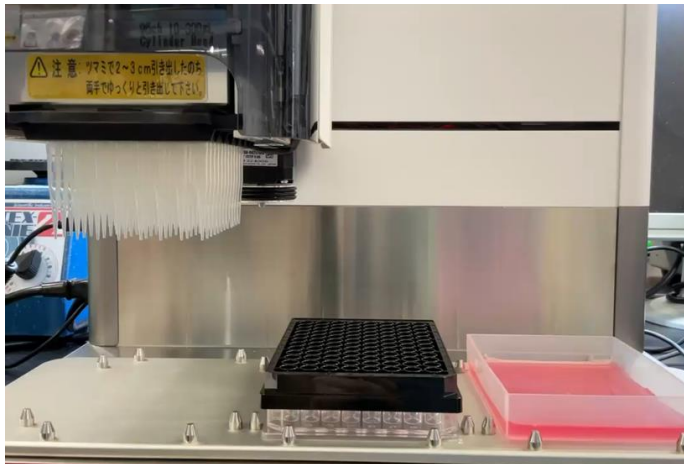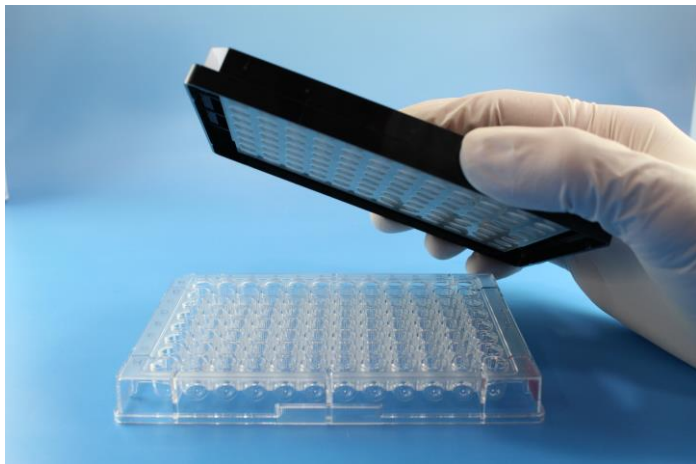

製品名：シーエスクリエ自動分注機用フィルトレーションプレート ※ガンマ線滅菌済（個包装）

特長：フローサイトメーターを使う方に、マイクロプレートに重ねて、自動分注機で試料を注入＆フィルトレーションをするメッシュ付きのプレートです。細胞の多検体処理を自動分注機対応で、作業時間を削減し、ハイスループット化を実現。



規格：96well、384wellプレート対応

メッシュサイズ：30μm、70μm、100μm

材質：プレート部：ポリスチレン、メッシュ部：ポリエステル繊維、

接着部：シリコン



対応機器：

バイオテック社ベンチトップマルチピペッター
EDR-384SE

商品名	数量	価格(円)
自動分注機用フィルトレーションプレート(96well対応) 30μm	5 pieces	32,500
自動分注機用フィルトレーションプレート(96well対応) 30μm	10 pieces	58,000
自動分注機用フィルトレーションプレート(96well対応) 70μm	5 pieces	32,500
自動分注機用フィルトレーションプレート(96well対応) 70μm	10 pieces	58,000
自動分注機用フィルトレーションプレート(96well対応) 100μm	5 pieces	32,500
自動分注機用フィルトレーションプレート(96well対応) 100μm	10 pieces	58,000

お問合せ先

開発販売元：シーエスクリエ株式会社


〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1

TEL: 0774-29-9037 担当：八木

<https://www.cscrie-jp.com>

ここが **Point**

オリジナル特許技術ー①

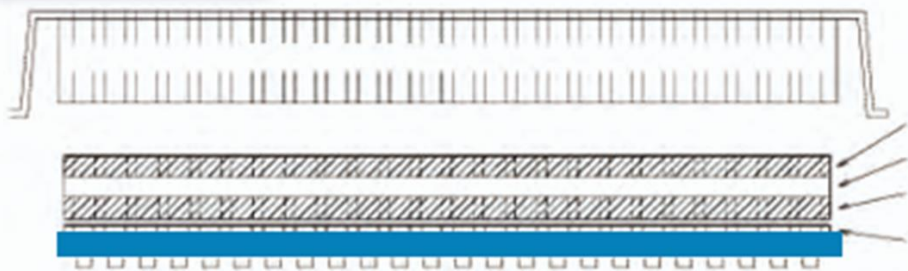



【プレート側面図】



シリコンシートを装着

プレートとプレートの間をシリコンで密着（緩衝材）


ここが **Point**

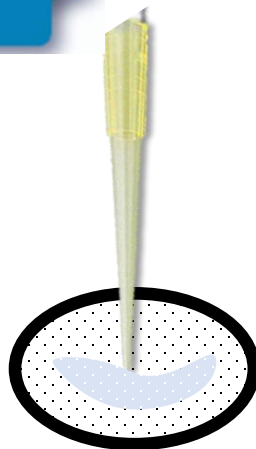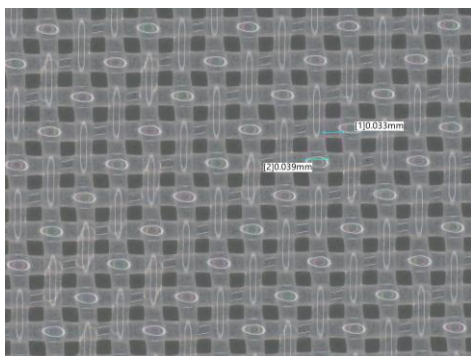


格子状の高均質メッシュ
チップの先端が
強く押しあてられても
破れない

ここが **Point**

細胞フィルトレーション前後の比較
※H E K 293細胞使用

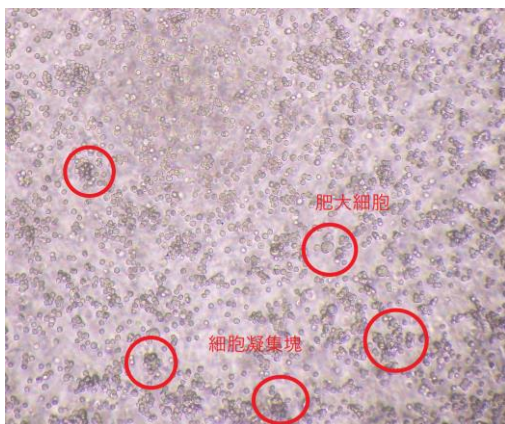

フィルトレーション前

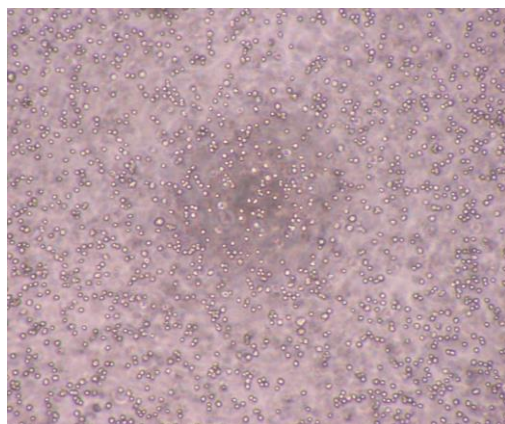

フィルトレーション後