


96ウェルおよび384ウェル洗浄可能なリニューアルモデルが登場。
多種多様なオプションを追加することで、幅広いアッセイに対応できるようモデルチェンジしました。

| |
|---|
| 96/384プレート対応 |
| 96平底プレートの高さ調整不要 |
| ノズル超音波洗浄機能を標準搭載 |
| 自動分注装置とのインテグレート可能 |
| 制御ソフトは日本語の為、付属のタッチパネルPCでの直感的な操作が可能 |
| マグネットユニット搭載可能でELISA用・96プレートを用いた磁性ビーズアッセイにも対応(オプション) |
| スタッカー接続で、最大50枚のプレート処理可能(オプション) |




EDR-384GX-24とのインテグレート例

■インテグレート対応装置

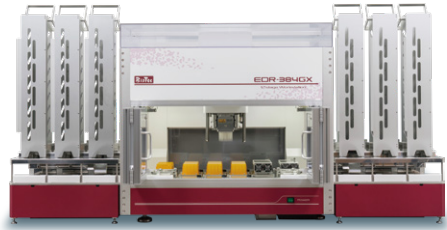

EDR-384GX

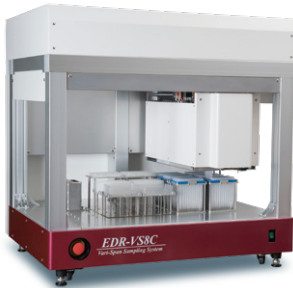

EDR-VS8C



EDR-VS8

■製品仕様

| | | | |
|--------|---|----------|--------------|
| 電源電圧 | AC100V±10%(50/60Hz) | 洗浄方法 | 96ウェル同時洗浄 |
| 消費電力 | 350W(真空ポンプ含む) | 洗浄量 | 50~999μL/ウェル |
| 寸法 | 410mm(W)×330mm(D)×160mm(H) | 洗浄サイクル | 0~99回 |
| 重量 | 16kg(本体のみ) | 超音波洗浄槽 | あり(標準搭載) |
| 本体制御 | タッチパネルPC | 衝突検知センサー | あり(標準搭載) |
| 適応プレート | 各種96マイクロプレート 各種96ウェルPCRプレート 各種384マイクロプレート | ミキシング機能 | あり(標準搭載) |

■価格

| 製品名 | 製品コード | 価格 |
|--|------------|-------------|
| MW-96DX スターターセット(本体+制御用PC+廃液ボトルセット+ポンプ込) | BA00070102 | ¥2,650,000- |
| MW-96DX 96/384プレート用ユニットセット(本体+制御用PC+96/384プレート用ユニット+廃液ボトルセット+ポンプ込) | BA00080102 | ¥3,000,000- |
| MW-96DX マグネットユニットセット(本体+制御用PC+マグネットユニット+廃液ボトルセット+ポンプ込) | BA00090102 | ¥3,250,000- |
| 本体 | BA00100102 | ¥2,200,000- |
| 96/384プレート用ユニット | BA00110102 | ¥380,000- |
| マグネットユニット | BA00120102 | ¥620,000- |
| スタッカー ※スタッカー+専用台 | BA00130102 | ¥2,700,000- |
| ポンプ+廃液ボトルセット | BA00140102 | ¥160,000- |
| 制御PC+ソフト | BA00150102 | ¥150,000- |

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

BioTec バイオテック株式会社[®]

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル901
TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689
横浜営業所/〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山1丁目22-16 近藤ビル1F
TEL.(045)509-1400 FAX.(045)509-1401

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail:info@biotec.co.jp

2511-1C-Y1 MW-96DX1.0

BioTec[®]

96/384プレート対応 新型アドバンスマイクロプレートウォッシャー

MW-96DX



バイオテック株式会社[®]

96/384プレート対応 新型アドバンスマイクロプレートウォッシャー

MW-96DX

384プレート対応

多くのお客様にご愛用いただいている96ウェル同時処理マイクロプレートウォッシャーに新機種が登場。384ウェル洗浄機能を追加し、幅広いアッセイに対応できるよう、モデルチェンジしました。


96平底プレートの高さ調整不要

※一部、手動調整が必要なプレートもあります。



磁性ビーズアッセイ対応

煩雑だった磁性ビーズ精製における洗浄工程の作業効率化を実現。オプションのマグネットユニット接続でELISA用・96プレートを用いた磁性ビーズアッセイにも対応できます。

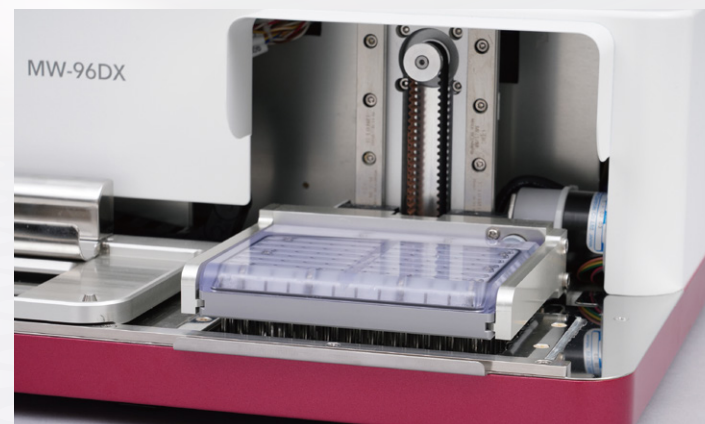

ノズル超音波洗浄可能


ノズル超音波洗浄機能を標準搭載し、セルフメンテナンスにより使用者の作業効率化を実現。

スタッカー接続

オプションのスタッカーを接続することで、最大50枚のプレート処理も対応可能です。



タッチパネル対応PCが付属

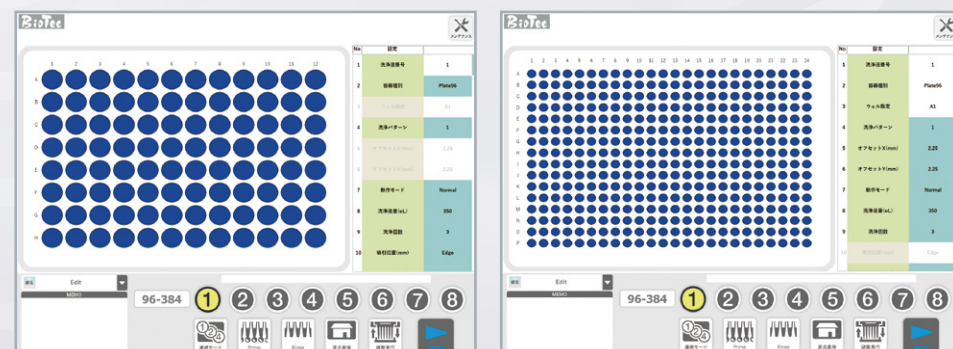

- 制御ソフトは全て日本語の為、付属のタッチパネルPCでの直感的な操作が実現しました。
- 細やかな設定や洗浄パターンもソフト上から簡単に設定出来ます。

積載可能なユニット



96プレート専用ユニット



96/384プレート用ユニット(オプション)



マグネットユニット(オプション)