

96ウェルおよび384ウェル洗浄可能なリニューアルモデルが登場。
 多種多様なオプションを追加することで、幅広いアッセイに対応できるようモデルチェンジしました。

96/384プレート対応
96平底プレートの高さ調整不要
ノズル超音波洗浄機能を標準搭載
自動分注装置とのインテグレート可能
制御ソフトは日本語の為、付属のタッチパネルPCでの直感的な操作が可能
マグネットユニット搭載可能でELISA用・96プレートを用いた磁性ビーズアッセイにも対応(オプション)
スタッカー接続で、最大50枚のプレート処理可能(オプション)




EDR-384GX-24とのインテグレート例

■インテグレート対応装置



EDR-384GX

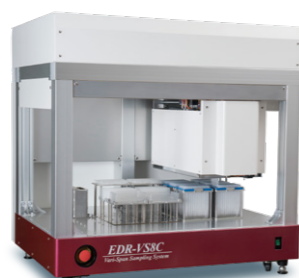

EDR-VS8C



EDR-VS8

■製品仕様

電源電圧	AC100V±10%(50/60Hz)	洗浄方法	96ウェル同時洗浄
消費電力	350W(真空ポンプ含む)	洗浄量	50~999μL/ウェル
寸法	410mm(W)×330mm(D)×160mm(H)	洗浄サイクル	0~99回
重量	16kg(本体のみ)	超音波洗浄槽	あり(標準搭載)
本体制御	タッチパネルPC	衝突検知センサー	あり(標準搭載)
適応プレート	各種96マイクロプレート 各種96ウェルPCRプレート 各種384マイクロプレート	ミキシング機能	あり(標準搭載)

■価格

製品名	製品コード	価格
MW-96DX スターターセット(本体+制御用PC+廃液ボトルセット+ポンプ込)	BA00070102	¥2,650,000-
MW-96DX 96/384プレート用ユニットセット(本体+制御用PC+96/384プレート用ユニット+廃液ボトルセット+ポンプ込)	BA00080102	¥3,000,000-
MW-96DX マグネットユニットセット(本体+制御用PC+マグネットユニット+廃液ボトルセット+ポンプ込)	BA00090102	¥3,250,000-
本体	BA00100102	¥2,200,000-
96/384プレート用ユニット	BA00110102	¥380,000-
マグネットユニット	BA00120102	¥620,000-
スタッカー ※スタッカー+専用台	BA00130102	¥2,700,000-
ポンプ+廃液ボトルセット	BA00140102	¥160,000-
制御PC+ソフト	BA00150102	¥150,000-

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

BioTec バイオテック株式会社

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
 TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
 大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル901
 TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689
 横浜営業所/〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山1丁目22-16 近藤ビル1F
 TEL.(045)509-1400 FAX.(045)509-1401


URL <http://www.biotech.co.jp> E-mail: info@biotech.co.jp

2511-1C-Y1 MW-96DX1.0



96/384プレート対応 新型アドバンスマイクロプレートウォッシャー

MW-96DX

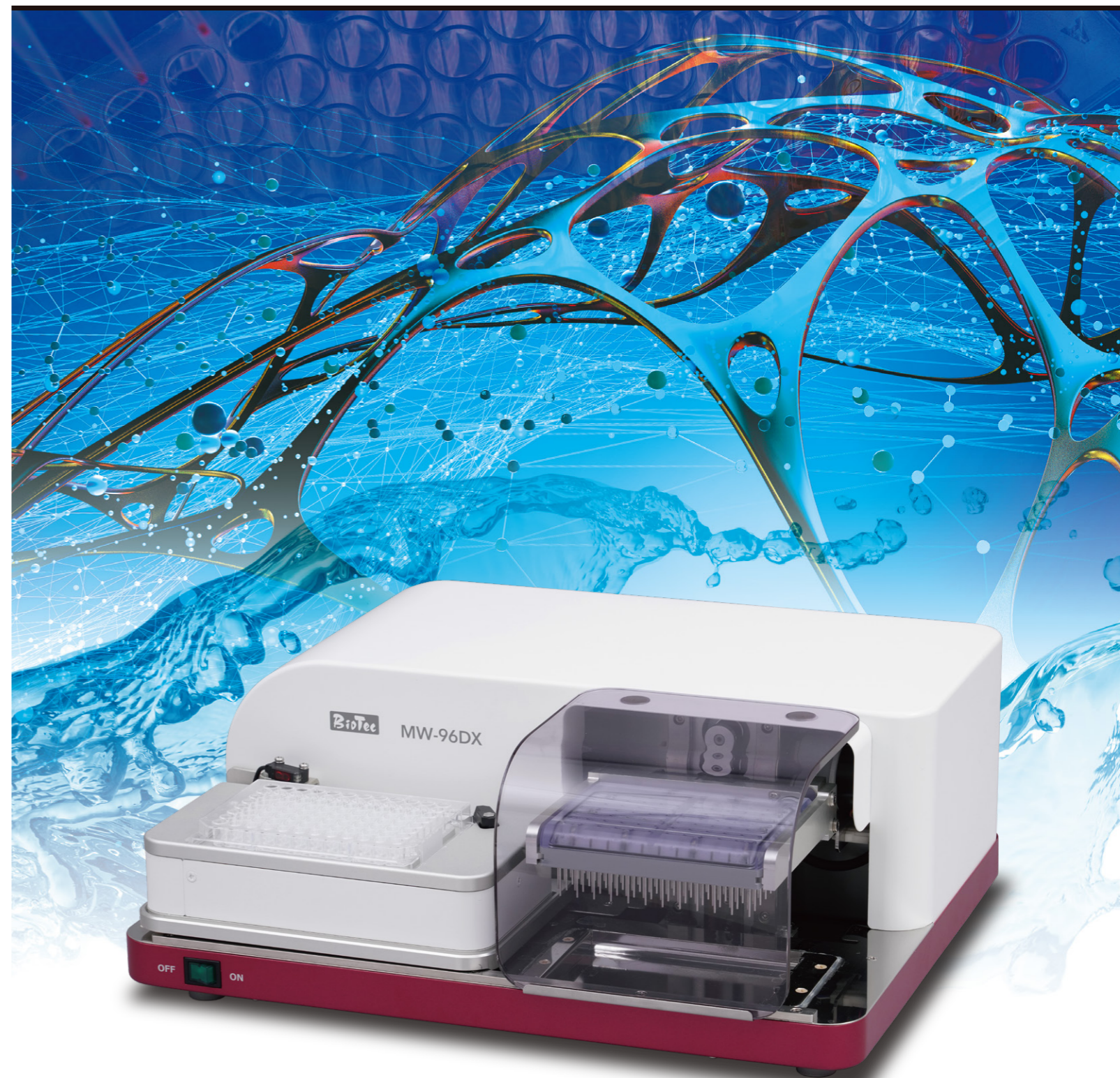

バイオテック株式会社


384プレート対応

多くのお客様にご愛用いただいている96ウェル同時処理マイクロプレートウォッシャーに新機種が登場。
384ウェル洗浄機能を追加し、幅広いアッセイに対応できるように、モデルチェンジしました。




磁性ビーズアッセイ対応

煩雑だった磁性ビーズ精製における洗浄工程の作業効率化を実現。
オプションのマグネットユニット接続で
ELISA用・96プレートを用いた磁性ビーズアッセイにも対応できます。

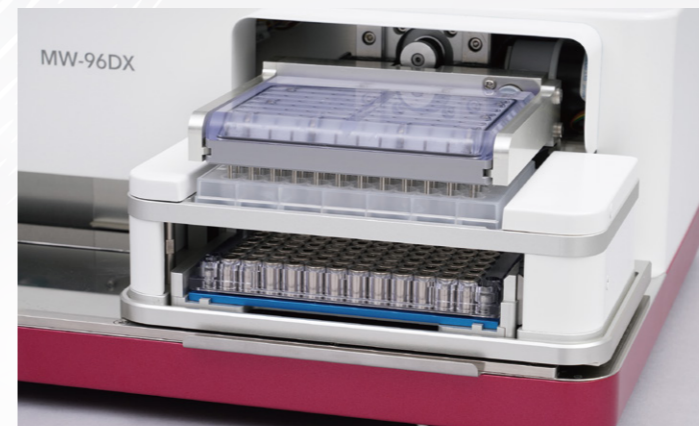

96平底プレートの高さ調整不要

※一部、手動調整が必要なプレートもあります。

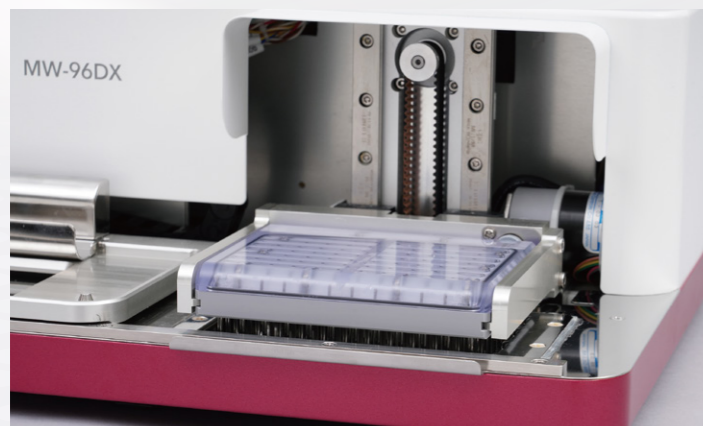


ノズル超音波洗浄可能


ノズル超音波洗浄機能を標準搭載し、セルフメンテナンスにより使用者の作業効率化を実現。

スタッカー接続

オプションのスタッカーを接続することで、最大50枚のプレート処理も対応可能です。

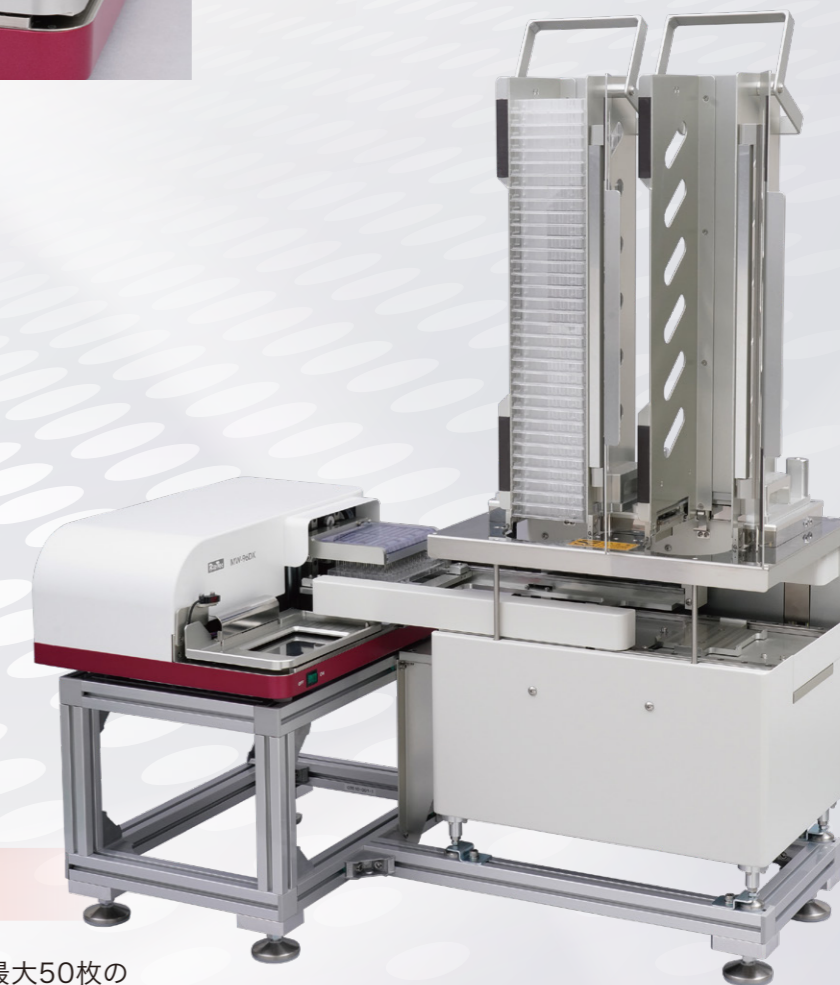

タッチパネル対応PCが付属

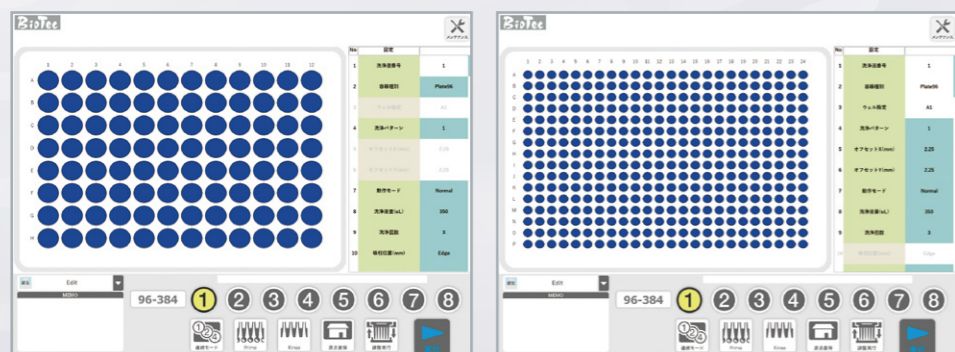

- 制御ソフトは全て日本語の為、付属のタッチパネルPCでの直感的な操作が実現しました。
- 細やかな設定や洗浄パターンもソフト上から簡単に設定出来ます。

積載可能なユニット



96プレート専用ユニット



96/384プレート用ユニット(オプション)



マグネットユニット(オプション)